

danalogic GN

ਡੈਨਾਲੋਗਿਕ ਐਕਟੀਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਲੂਟੂਥ®
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ



GN Making Life Sound Better

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡੈਨਾਲੋਗਿਕ ਐਕਟੀਓ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੂਥ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ (ਕਾਲਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ) ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ go.gn.com/app-support


ਡੈਨਾਲੋਗਿਕ ਐਕਟੀਓ (Danalogic Actio) ਕੋਲ ਚੁਣੀਂਦਾ Apple® ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ Apple ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ go.gn.com/app-support

ਬਲੂਟੁੱਥ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

- ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੈੱਡਫੋਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ



ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

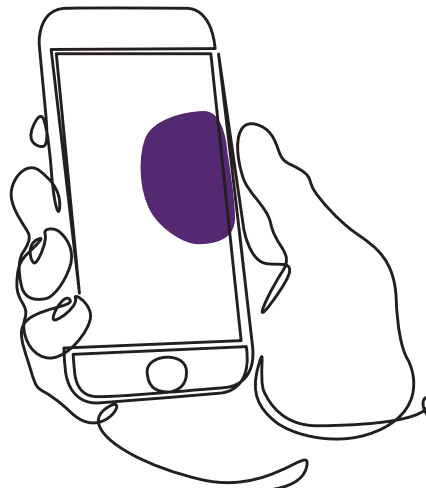

ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Apple ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ

1. ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਬੰਦ ਕਰੋ।
2. ਆਪਣੀ Apple ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ 'ਸੈਟਿੰਗ' ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੂਟੂਥ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਟੂਥ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਮੁੱਖ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (Accessibility)' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
4. 'ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ (Hearing Devices)' ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ Apple ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

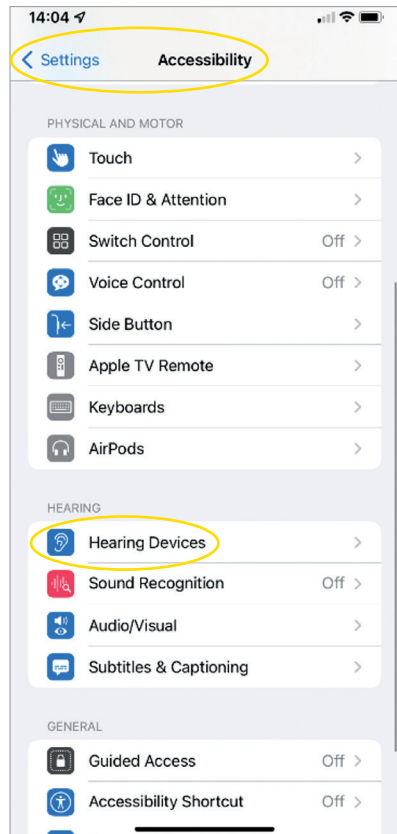

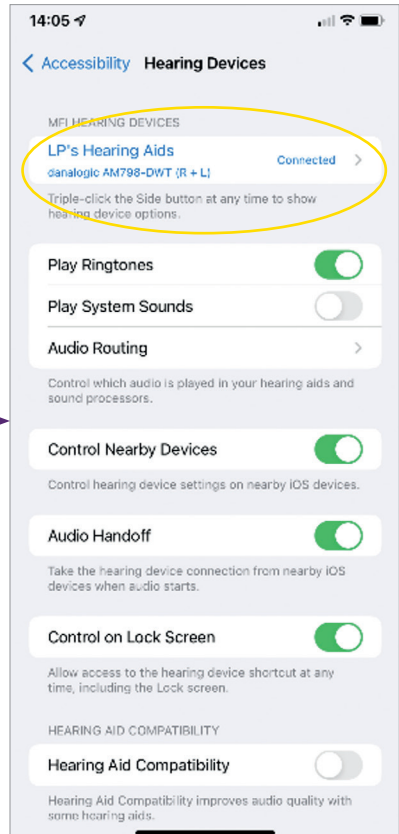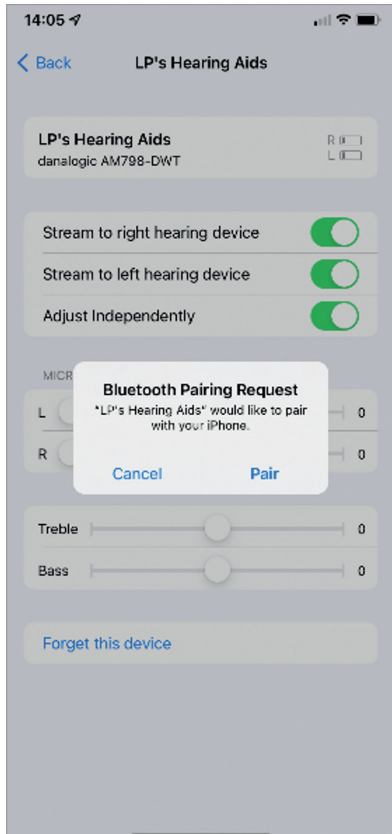


6. 'ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ (Pair)' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲਈ 'BeMore' ਖੋਜੋ।
8. BeMore ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ (Get Started)' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
9. ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।

ਟਿੱਪਣੀ: ਇਹ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ iOS 13 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ Apple ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।


1. ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
2. ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (Accessibility)' ਚੁਣੋ।
3. 'ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ (ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ)' ਚੁਣੋ।
4. 'MFI Hearing Devices' ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ 'ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ (Forget this device)' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
5. ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ (pair)' ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ (pair)' ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

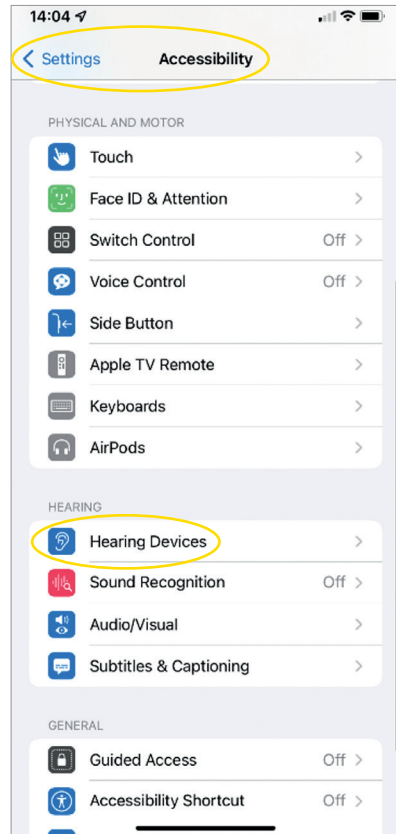

ਡੈਨਾਲੋਗਿਕ ਐਕਟੀਵ ਨਾਲ iPhone® ਅਤੇ iPad® ਲਈ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣੀਏ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਚ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ go.gn.com/app-support


ਫੰਕਸ਼ਨ	ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ	ਆਈਫੋਨ/ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ
ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ	ਕਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਦੂਜੀਆਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ	ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਡਿੱਕਲਾਈਨ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਣਾ	ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
iOS ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ	ਆਈ ਓ ਐਸ (iOS) ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)। 'ਇਨਪੁਟ ਵਿਕਲਪ' ਚੁਣੇ ਫਿਰ 'ਬੰਦ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ

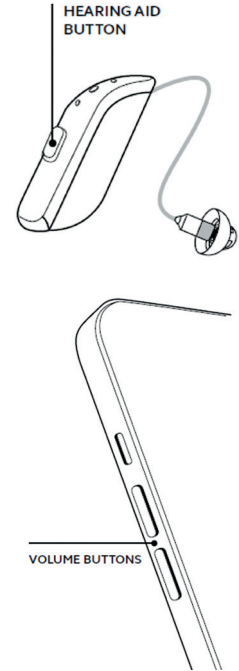

ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ
danalogic.co.uk/patient-portal

ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Android™ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ

1. Google Play ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ, BeMore ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
2. ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ (Get Started)' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
3. ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।

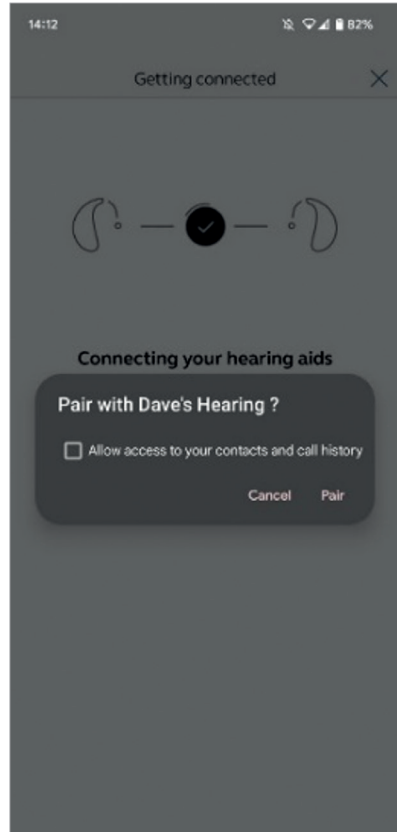

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ Android ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

1. 'ਸੈਟਿੰਗਜ਼' ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਲੂਟੂਥ ਆਈਕਨ ਨੂੰ 2 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
2. ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਆਈਕਨ ਨੂੰ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਫੜੀ ਰੱਖੋ।
3. 'ਭੁੱਲੋ (Forget)' ਚੁਣੋ।
4. BeMore ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
5. 'BeMore ਮੀਨੂ' ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਜੋੜੋ (Pair new hearing aids)' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।



danalogic GN

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.danalogic.co.uk ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

© 2022 The GN ReSound Group, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਡੈਨਾਲੋਜਿਕ GN Hearing A/S ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ। Apple ਅਤੇ Apple ਲੋਗੋ, Apple Inc. ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਐਪ ਸਟੋਰ Apple Inc. ਦਾ ਸੇਵਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। Android, Google Play ਅਤੇ Google Play ਲੋਗੋ Google LLC ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ। ਬਲੂਟੂਥ ਸ਼ਬਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੋਗੋ, ਬਲੂਟੂਥ SIG, Inc ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।



danalogic GN

GN ਦਾ ਡੈਨਾਲੋਜਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਡੈਨਾਲੋਜਿਕ, GN ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ - ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਬਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੈੱਡਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਤੱਕ, ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1869 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। GN ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

www.danalogic.co.uk



ਜੀ ਐਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਯੂ ਕੇ ਲਿਮ. ਯੂਨਿਟ
(GN Hearing UK Ltd.
Unit) 13,
ਤਾਲਿਸਮਾਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸੈਂਟਰ (Talisman
Business Centre,
Bicester) OX26 6HR
ਟੈਲੀ: +44 1869 352 800
ਫ਼ੈਕਸ: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk