

danalogic GN

danalogic Actio

Нові слухові апарати з Bluetooth®



Ваші нові слухові апарати danalogic Actio мають Bluetooth.

Це чудова новина, оскільки ця функція дає вам змогу прослуховувати звуки зі смарт-пристрою (дзвінки, музику й інше аудіо) безпосередньо через слухові апарати.

Список сумісних смарт-пристроїв для цієї функції дивіться тут **go.gn.com/app-support**


Danalogic Actio також має функцію гучного зв'язку з вибраними пристроями Apple®. Функція гучного зв'язку дає вам змогу відповідати на телефонні дзвінки за допомогою слухових апаратів, при цьому вони діятимуть як мікрофон для уловлювання вашого голосу, а також передаватимуть звук з телефону безпосередньо у ваші слухові апарати. Список сумісних пристроїв Apple для цієї функції дивіться тут **go.gn.com/app-support**

Переваги слухових апаратів на базі Bluetooth

- Розмовляти по телефону через слуховий апарат може бути дещо непросто. Ваші нові слухові апарати дають змогу безпосередньо передавати в потоковому режимі телефонні та відеодзвінки. Це полегшує сприйняття сказаного.
- Вам більше не потрібно носити навушники, щоб слухати музику, відео або інше аудіо зі свого смарт-пристрою, оскільки звук буде передаватися в слухові апарати в потоковому режимі.


Підключення слухового апарату для потокового передавання через Bluetooth



Якщо у вас є сумісний смарт-пристрій, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у цьому буклеті, щоб підключити до нього слухові апарати.

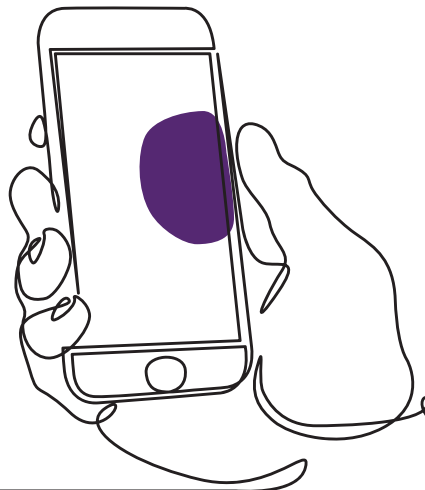

Як з'єднати слуховий апарат з пристроєм Apple®?

1. Вимкніть слуховий апарат.
2. Увімкніть Bluetooth, перейшовши в меню «Налаштування» на вашому пристрої Apple. Коли ви активуєте Bluetooth, повзунок стає зеленим.
3. Поверніться до головного меню «Налаштування», а потім натисніть «Доступність».
4. Прокрутіть вниз до елементу меню «Слухові апарати».
5. Якщо ваш слуховий апарат увімкнений, будь ласка, перезапустіть його. В іншому випадку, будь ласка, увімкніть слуховий апарат. Це гарантує, що пристрій Apple зможе виявити ваш слуховий апарат.

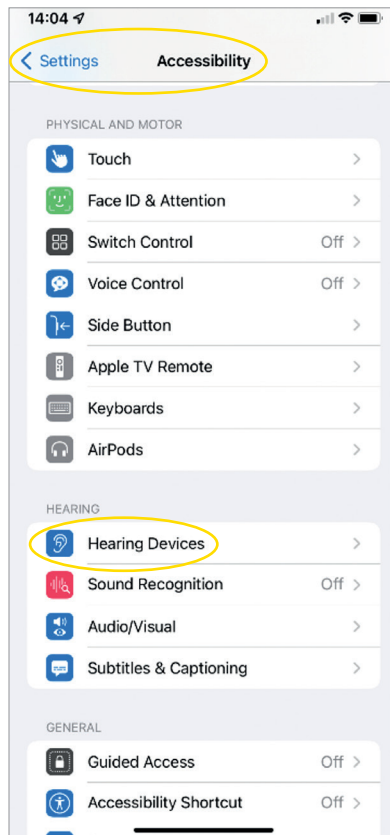

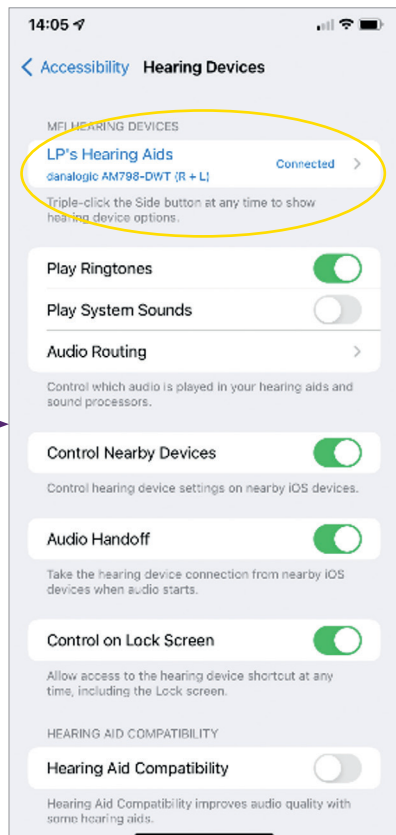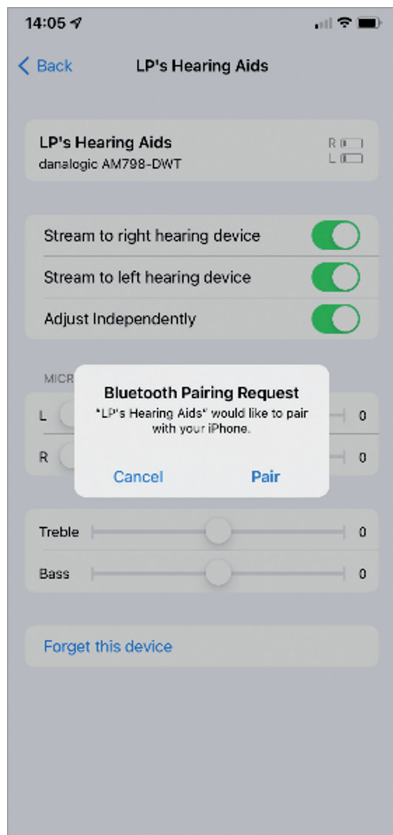


6. Натисніть «З'єднати». Якщо у вас два слухових апарати, вам потрібно буде зробити це двічі.
7. Зайдіть в App Store і знайдіть VeMore для вашого слухового апарату.
8. Завантажте додаток VeMore. Відкрийте його і натисніть «Почати».
9. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб під'єднатися до додатка. Тепер усе готово до роботи.

ПРИМІТКА: Ось кроки і те, як вони влаштовані в iOS 13 і новіших версіях

Якщо вам потрібно повторно під'єднати апарат до пристрою Apple

Якщо один або обидва ваші слухові апарати були замінені, вам потрібно буде повторно створити пару з вашим смарт-пристроєм.



1. Почніть з видалення старих слухових апаратів, перейшовши в меню «Налаштування».
2. Прокрутіть вниз і виберіть «Доступність».
3. Виберіть «Слухові апарати».
4. Виберіть слуховий апарат в розділі «Слухові апарати MFI» і натисніть на «Забути цей пристрій».
5. Перезапустіть новий слуховий апарат і натисніть «З'єднати». Вам потрібно буде натиснути «З'єднати» двічі, якщо ви використовуєте два слухові апарати.

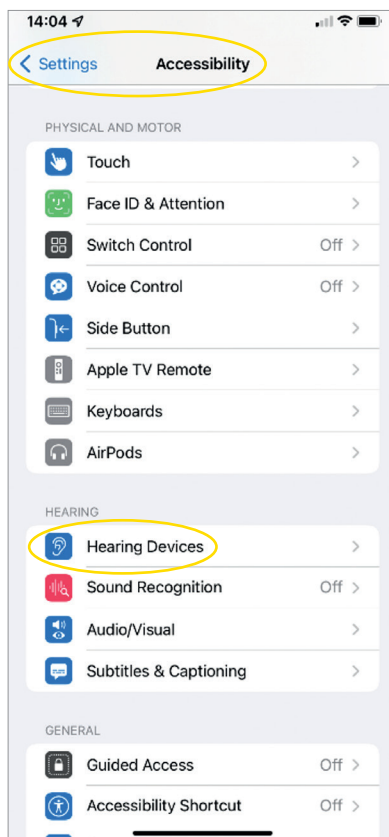

Як користуватися гучним зв'язком для дзвінків на iPhone® та iPad® за допомогою Danalogic Actio

Будь ласка, переконайтеся, що ваш пристрій підтримує цю функцію, завітавши на наш вебсайт go.gn.com/app-support


| Функція | Як |
|---|--|
| Відповісти на дзвінок | Використовуйте коротке натискання на кнопку слухового апарату або повзунок, щоб відповісти на iPhone/iPad |
| Закінчити дзвінок | Натисніть і утримуйте кнопку слухового апарату кілька секунд, щоб завершити дзвінок. Або покладіть слухавку, натиснувши червону кнопку на екрані |
| Другі вхідні дзвінки | Якщо ви розмовляєте по телефону і вам надходить другий дзвінок, відхиліть його за допомогою довгого натискання на кнопку слухового апарату або торкніться «Відхилити» на екрані iPhone або iPad. |
| Змінити гучність | Використовуйте кнопки збільшення і зменшення гучності на iPhone або iPad |
| Вимкнути гучний зв'язок у налаштуваннях слухового апарату iOS | Тричі натисніть кнопку iPhone, щоб отримати доступ до налаштувань слухового апарату iOS (ви також можете увійти через Центр управління). Виберіть «Вхідні параметри», а потім «Вимкнути» |

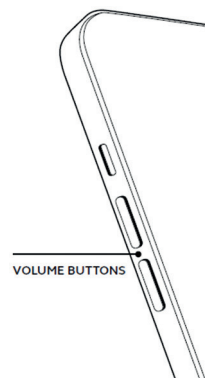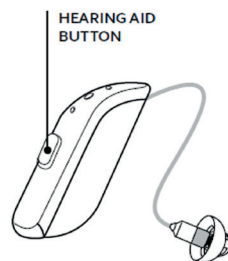

Відскануйте QR-код, щоб переглянути відеоінструкцію або перейти на danalogic.co.uk/patient-portal

Як з'єднати слуховий апарат із пристроєм Android™?

1. Зайдіть в Google Play Store, знайдіть VeMore і завантажте додаток.
2. Після завантаження відкрийте додаток і торкніться «Почати».
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб під'єднатися до додатка. Тепер усе готово до роботи.

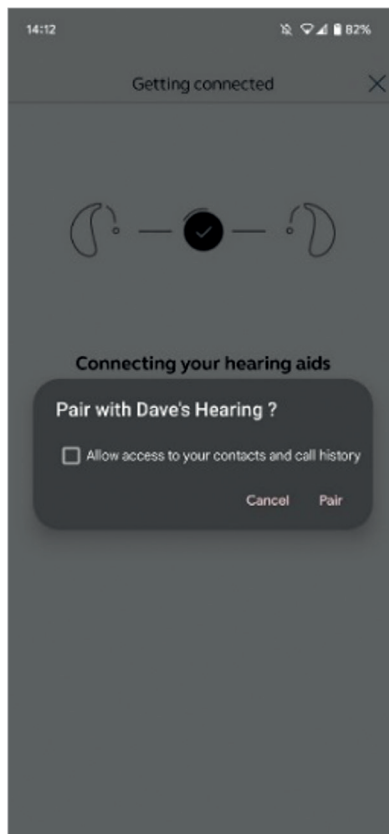

Якщо вам потрібно повторно під'єднати апарат до пристрою Android

Якщо один або обидва ваші слухові апарати були замінені, вам потрібно буде повторно створити пару з вашим смарт-пристроєм.

1. Проведіть вниз від верхньої частини екрана, щоб відкрити меню «Налаштування», потім утримуйте піктограму Bluetooth протягом 2 секунд.
2. Утримуйте піктограму «Налаштування слухових апаратів» протягом 2 секунд.
3. Виберіть «Забути».
4. Відкрийте додаток BeMore.
5. Відкрийте «Меню BeMore» і виберіть «Під'єднати нові слухові апарати». Потім дотримуйтесь інструкцій на екрані для з'єднання. Тепер усе готово до роботи.



danalogic GN

Якщо у вас виникли труднощі, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт www.danalogic.co.uk для отримання додаткової інформації або зверніться до лікаря-аудіолога.



Відскануйте тут, щоб отримати миттєвий доступ до служби підтримки для слухових апаратів, інструкцій з догляду, відеоінструкцій тощо

© 2022 The GN ReSound Group, усі права застережені. Danalogic є торговельною маркою GN Hearing A/S. Apple і логотип Apple є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США й інших країнах. App Store є знаком обслуговування Apple Inc., зареєстрованим у США й інших країнах. Android, Google Play та логотип Google Play є торговельними марками компанії Google LLC. Текстовий знак і логотипи Bluetooth є зареєстрованими торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc.



danalogic GN

Danalogic від GN докладаеть всіх зусиль для досягнення позитивних результатів на всьому шляху пацієнта, даючи змогу Національній службі охорони здоров'я надавати кращу медичну допомогу там, де це справді важливо. Analogic є частиною групи компаній GN Group — першовідкривача чудового звуку в пристроях, починаючи від провідних світових слухових апаратів і до офісних гарнітур Jabra та спортивних навушників. Компанія заснована в 1869 році, і в ній працює понад 5 000 співробітників. GN робить життя кращим.

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.
Unit 13,
Talisman Business Centre,
Bicester OX26 6HR
Тел. +44 1869 352 800
Факс: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk