


danalogic GN

danalogic Actio

آپ کا نیا
Bluetooth®
آلہ سماعت

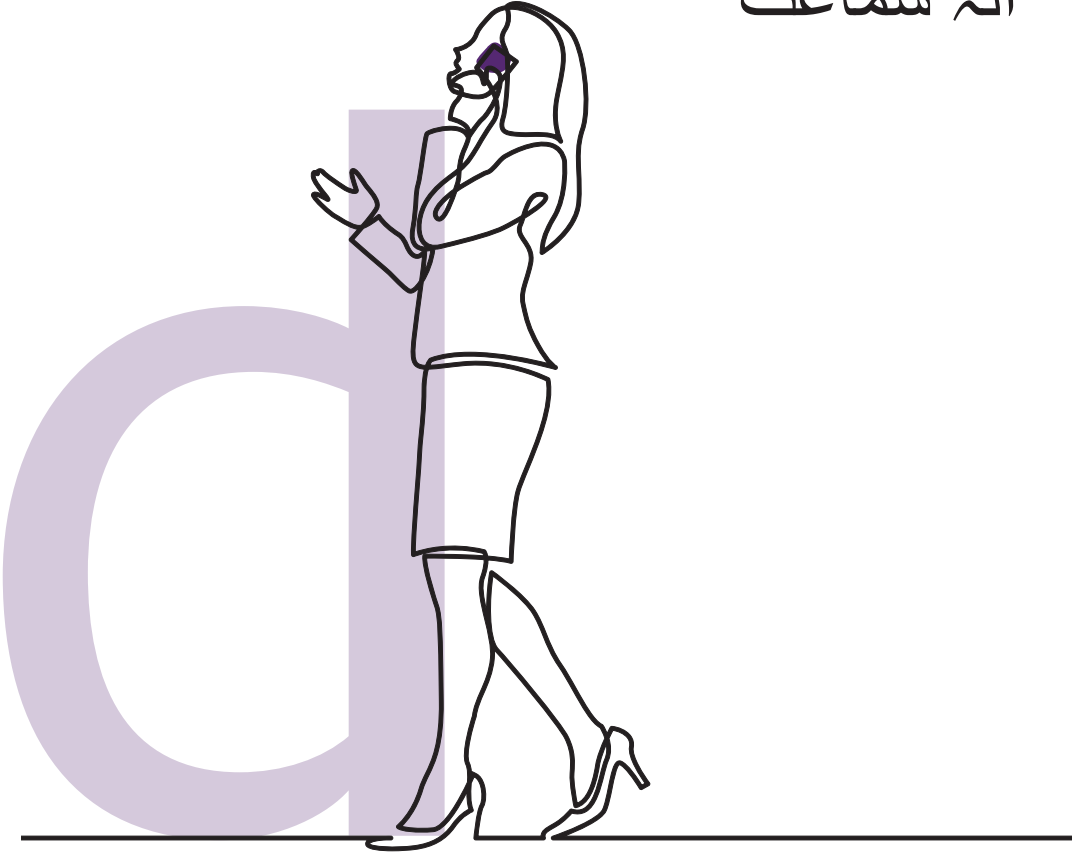

GN Making Life Sound Better

آپ کا danalogic Actio نیا آلہ سماعت بلوٹوتھ کی خصوصیت کا حامل ہے۔

یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اس کی مدد سے سمارٹ ڈیوائس (کالز، میوزک، اور دیگر آڈیو) کی آوازیں براہ راست آپ کے آلہ سماعت سے اسٹریم کی جائیں گی۔

اس خصوصیت کی حامل موافق سمارٹ ڈیوائسز کی فہرست ملاحظہ کرنے کے لیے براہ کرم go.gn.com/app-support پر فہرست دیکھیں

Danalogic Actio میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ منتخب کردہ Apple® ڈیوائسز کے ساتھ ہینڈز فری کالنگ کی اجازت بھی دیتا ہے۔ ہینڈز فری کالنگ کی خصوصیت کی مدد سے آپ اپنے آلہ سماعت کا استعمال کرتے ہوئے فون کال کا جواب دے سکتے ہیں اور آپ کا آلہ سماعت آپ کی آواز کے لیے مائیکرو فون کی طرح کام کرے گا، نیز آپ کو فون کی آواز براہ راست آلہ سماعت کی مدد سے سنائی دے گی۔ اس خصوصیت کی حامل موافق Apple ڈیوائسز کی فہرست کے لیے براہ کرم go.gn.com/app-support ویب سائٹ پر جائیں


بلوٹوتھ آلہ سماعت کے فوائد

- کان میں آلہ سماعت لگائے ہوئے فون کال سننا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کا نیا آلہ سماعت آپ کو فون اور ویڈیو کال دونوں براہ راست سننے کی اجازت دیتا ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس کو سننا آسان بنا دیتا ہے۔
- اب آپ کو اپنی سمارٹ ڈیوائس سے میوزک، ویڈیوز یا دیگر آڈیو سننے کے لیے ہیڈ فونز کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آواز براہ راست آپ کے آلہ سماعت کے ذریعے پہنچائی جائے گی۔




بلوٹوتھ اسٹریمنگ کے لیے اپنے آلہ سماعت کو منسلک کرنا

اگر آپ کے پاس موافق سمارٹ ڈیوائس ہے، تو براہ کرم اس سے آلہ سماعت کو منسلک کرنے کے لیے اس کتابچے میں موجود ہدایات پر عمل کریں۔

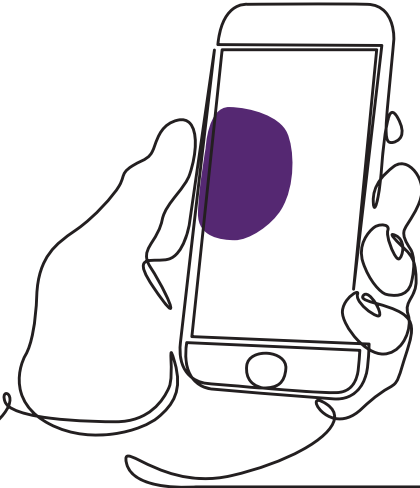

اپنی Apple ڈیوائس کے ساتھ اپنے آلہ سماعت کی جوڑ کاری کس طریقے سے کریں

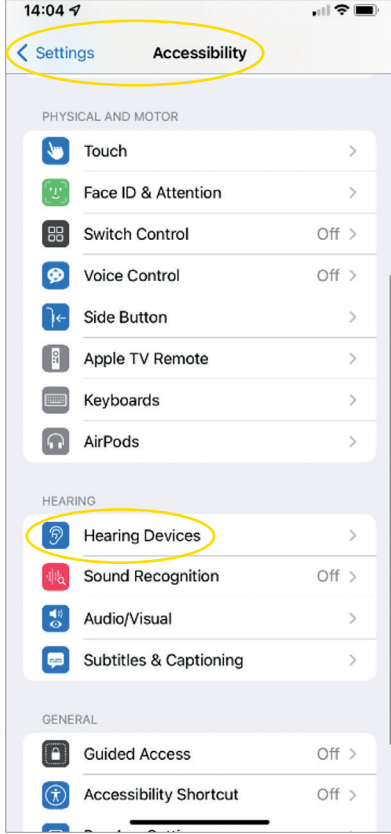

1. اپنا آلہ سماعت بند کریں۔



2. اپنی Apple ڈیوائس کی 'ترتیبات' کی فہرست میں جا کر بلوٹوتھ آن کریں۔ جب آپ بلوٹوتھ فعال کریں گے تو سلائڈر سبز ہو جائے گا۔

3. ترتیبات کی مرکزی فہرست میں واپس جائیں اور 'رسانی پذیری' پر ٹیپ کریں۔

4. نیچے اسکرول کر کے 'سماعتی ڈیوائسز' پر جائیں۔

5. اگر آپ کا آلہ سماعت پہلے سے آن ہے، تو براہ کرم اسے ری سٹارٹ کریں۔ بصورت دیگر، براہ کرم اپنا آلہ سماعت آن کریں۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کی Apple ڈیوائس آپ کے آلہ سماعت کا پتہ لگا رہی ہے۔



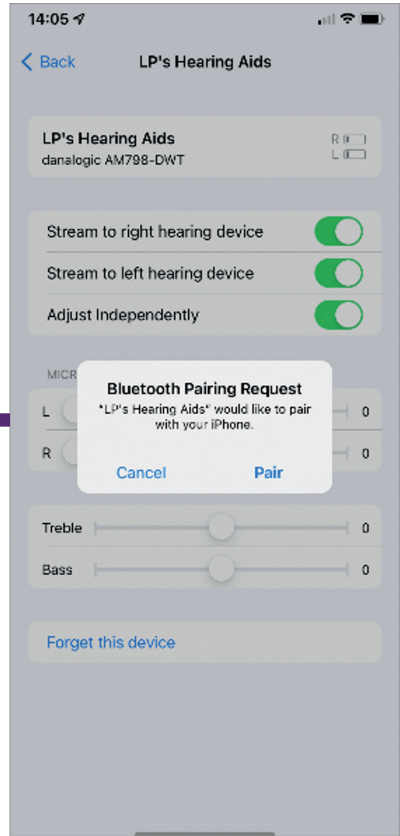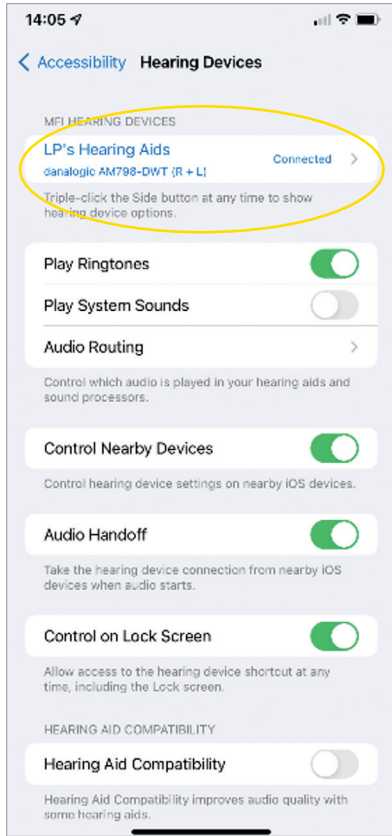

6. 'جوڑ کاری' پر کلک کریں۔ اگر آپ کے دو آلہ سماعت ہیں، تو آپ کو دو دفعہ قبول کرنے کی ضرورت ہو گی۔

7. App Store میں جائیں اور اپنے آلہ سماعت کے لیے 'BeMore' تلاش کریں۔

8. BeMore ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کو کھولیں اور شروع کریں' پر ٹیپ کریں۔


9. ایپ سے منسلک ہونے کے لیے اسکرین پر دی گئی ہدایات کی پیروی کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔

نوٹ فرمائیں: یہ مراحل ہیں اور یہ iOS 13 اور نئے میں کیسے کام کرتے ہیں

اگر آپ کو اپنی Apple ڈیوائس سے دوبارہ جوڑ کاری درکار ہے



اگر آپ کا ایک یا دونوں آلہ سماعت تبدیل ہو گئے ہیں، تو آپ کو اپنی سمارٹ ڈیوائس سے دوبارہ جوڑ کاری کرنے کی ضرورت ہو گی۔

1. ترتیبات کی فہرست میں جا کر پرانے آلہ سماعت کو ہٹانے سے شروع کریں۔
2. نیچے اسکرول کریں اور 'رسائی پذیری' منتخب کریں۔
3. 'سماعتی ڈیوائسز' منتخب کریں۔
4. اسکرین پر 'MFI سماعتی ڈیوائسز' سیکشن کے تحت آلہ سماعت منتخب کریں اور 'اس ڈیوائس کو بھول جائیں' پر ٹیپ کریں۔
5. اپنا نیا آلہ سماعت ری سٹارٹ کریں اور 'جوڑ کاری' دبائیں۔ دو آلہ سماعت استعمال کرنے کی صورت میں آپ کو 'جوڑ کاری' پر دو دفعہ ٹیپ کرنا ہو گا۔

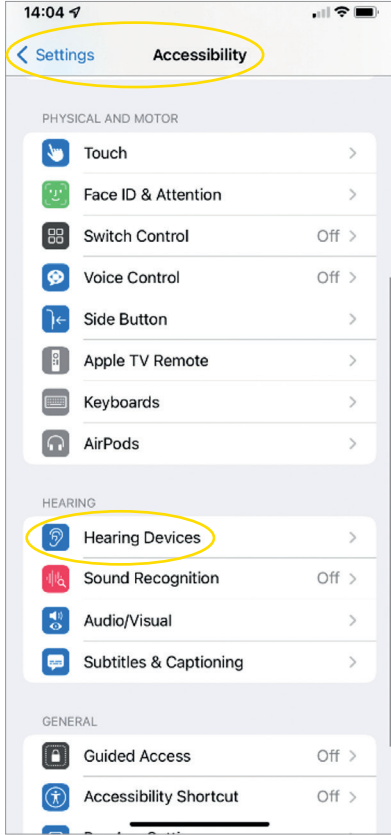

Danalogic Actio کے ساتھ iPhone® اور iPad® کی ہینڈ فری کالز سے کیسے لطف اندوز ہوں

براہ کرم ہماری ویب سائٹ go.gn.com/app-support پر
جا کر یقینی بنائیں کہ آپ کی ڈیوائس موافق ہے

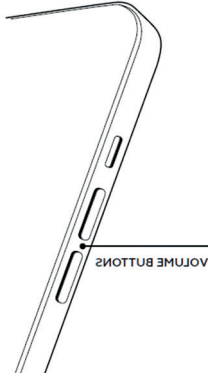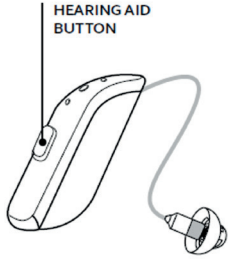

فنگشن	کال کا
جواب کیسے دیا جائے	اپنے آلہ سماعت کا بٹن چند لمحوں کے لیے دبائے رکھیں یا iPhone/iPad پر کال کا جواب دینے کے لیے سلائیڈ کریں
کال کا اختتام	کال بند کرنے کے لیے اپنے آلہ سماعت کا بٹن کچھ دیر کے لیے دبا کر رکھیں۔ متبادل طور پر، اپنی اسکرین پر سرخ بٹن پر ٹیپ کر کے کال منقطع کریں
دوسری آنے والی کالز	اگر آپ کال پر بات کر رہے ہوں اور آپ کو دوسری کال آ رہی ہو، تو اپنے آلہ سماعت کے بٹن کو تھوڑی زیادہ دیر کے لیے دبا کر اسے منقطع کریں یا iPhone یا iPad اسکرین پر 'منقطع کریں' پر ٹیپ کریں
آواز کی تبدیلی	iPhone یا iPad پر والیوم زیادہ یا کم کرنے والے بٹنز استعمال کریں
iOS آلہ سماعت کی ترتیبات میں ہینڈ فری کالز بند کریں	iOS آلہ سماعت کی ترتیبات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے iPhone پر بٹن تین دفعہ کلک کریں (آپ کنٹرول سینٹر کے ذریعے بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں)۔ 'ان پٹ اختیارات' پر 'آف' منتخب کریں


طریقہ کار کے بارے میں ویڈیو تک رسائی کے لیے
QR کوڈ اسکین کریں یا وزٹ کریں:
danalogic.co.uk/patient-portal



اپنی Android™ ڈیوائس کے ساتھ اپنے آلہ سماعت کی جوڑ کاری کس طریقے سے کریں



1. Google Play Store پر جائیں، BeMore تلاش کریں اور ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
2. ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ ہو جانے کے بعد، ایپ کھولیں اور شروع کریں' پر ٹیپ کریں۔
3. ایپ سے منسلک ہونے کے لیے اسکرین پر دی گئی ہدایات کی پیروی کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔

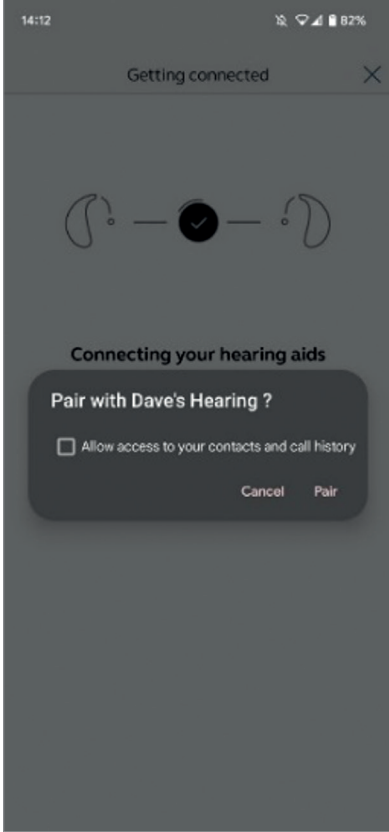

اگر آپ کو اپنی Android ڈیوائس سے دوبارہ جوڑ کاری درکار ہے

اگر آپ کا ایک یا دونوں آلہ سماعت تبدیل ہو گئے ہیں، تو آپ کو اپنی سمارٹ ڈیوائس سے دوبارہ جوڑ کاری کرنے کی ضرورت ہو گی۔

1. 'ترتیبات' کی فہرست کھولنے کے لیے اسکرین اوپر سے نیچے کی طرف سوائپ کریں، پھر بلوٹوتھ آئیکن کو 2 سکینڈ کے لیے دبا کر رکھیں۔
2. آلہ سماعت کے لیے ترتیبات کے آئیکن کو 2 سکینڈز کے لیے دبائے رکھیں۔
3. 'بھول جائیں' منتخب کریں۔
4. BeMore ایپ کھولیں۔
5. 'BeMore فہرست' کھولیں اور 'نئی ڈیوائس سے جوڑ کاری' منتخب کریں۔ پھر منسلک ہونے کے لیے اسکرین پر نمودار ہونے والی ہدایات کی پیروی کریں۔ اب آپ اس عمل کے لیے تیار ہیں۔



danalogic GN

اگر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، تو مزید رہنمائی کے لیے براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.danalogic.co.uk چیک کریں یا اپنے آڈیولوجسٹ سے رابطہ کریں۔



آلہ سماعت سے متعلق معاونت، نگہداشتی ہدایات، طریقہ کار سے متعلق ویڈیوز اور مزید چیزوں تک فوری رسائی کے لیے، مجھے اسکین کریں۔



© 2022 GN ReSound گروپ، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ Danalogic GN Hearing A/S کا ٹریڈ مارک ہے۔ Apple اور Apple لوگو انکارپوریشن کے ٹریڈ مارکس ہیں، جو امریکہ اور دیگر ممالک میں رجسٹرڈ ہیں۔ Apple App Store انکارپوریشن کا سروس مارک ہے، جو امریکہ اور دیگر ممالک میں رجسٹرڈ ہے۔ Google Play، Android، اور Google Play لوگو کا لوگو Google LLC کے ٹریڈ مارکس ہیں۔ Bluetooth اور لوگو Bluetooth SIG انکارپوریشن کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ہیں۔



danalogic GN

GN کی جانب سے Danalogic مریض کی تندرستی کے مکمل سفر میں مثبت نتائج لا رہا ہے، جس سے NHS کو وہاں بہترین نگہداشت کی فراہمی میں مدد مل رہی ہے جہاں اس کی واقعی ضرورت ہے۔

Danalogic GN گروپ کا حصہ ہے – جو کہ دنیا کی معروف سماعتی ڈیوائسز سے لے کر Jabra آفس کے ہیڈسیٹس اور اسپورٹس ہیڈ فونز تک بہترین آواز کا علمبردار ہے۔ 1869 میں قائم کردہ اور 5,000 سے زائد افراد کا وسیلہ روزگار ہے۔ GN آوازوں کو بہتر بناتا ہے۔

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd.

Unit 13,

Talisman Business Centre,

Bicester OX26 6HR

ٹیلی فون: +44 1869 352 800

فیکس: +44 1869 343 466

danalogicuk@gnhearing.com

www.danalogic.co.uk