

danalogic GN

डेनालोजिक एक्सटेन्ड

तपाईंको नयाँ ब्लूटूथ®
कम ऊर्जा अडियो श्रवण
यन्त्रहरू



तपाईंको नयाँ डेनालोजिक एक्सटेन्ड श्रवण यन्त्रहरू, हाम्रो पहिलो NHS दायराको ब्रान्ड-नयाँ ब्लुटूथ® कम ऊर्जा अडियो प्रोटोकल समावेश गर्ने

ब्लुटूथ LE अडियो उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग र श्रवण सहायता निर्माताहरूसँगको सहकार्यमा विकसित गरिएको थियो। ब्लुटूथ LE अडियो कम पावर, खपत, उच्च अडियो गुणस्तर, र धेरै कम विलम्बताको लागि अनुकूलित छ। ब्लुटूथ LE अडियोको साथ, टेलिभिजन, ल्यापटप वा अन्य ब्लुटूथ 5.3 उपयुक्त उपकरणहरूबाट श्रवण यन्त्रहरूमा प्रत्यक्ष जडानहरू स्थापना गर्न सम्भव हुनेछ। डेनालोजिक एक्सटेन्डमा यो नयाँ प्रोटोकल पूर्वनिर्धारित रूपमा निर्मित छ र औराकास्ट प्रसारण स्ट्रिमहरूमा पनि जडान गर्न सकिन्छ। अर्थात् यो कनेक्टिविटीको सन्दर्भमा तपाईंका बिरामीहरूको लागि साँच्चै भविष्यको प्रमाणित समाधान हो।

सबै युनिटहरू जडान गर्न मध्यवर्ती उपकरणको आवश्यकता बिना नै। ब्लुटूथ कम ऊर्जा प्रविधिको लागि धन्यवाद, तपाईं ब्याट्री जीवन सुरक्षित राख्दै दिन भरि स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ।

कम्प्याटिबल स्मार्ट उपकरणहरूको सूचीको लागि कृपया यहाँ सूची हेर्नुहोस्

www.danalogic.co.uk/connectivity

डेनालोजिक एक्सटेन्डसँग चयन गरिएका एप्पल® उपकरणहरूसँग ह्यान्ड्स-फ्री कलिडको लागि अनुमति दिने क्षमता पनि छ। ह्यान्ड्स-फ्री कलिडले तपाईंलाई आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू प्रयोग गरेर फोन कलहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छ र तपाईंको श्रवण यन्त्रहरूले तपाईंको आवाज उठाउन माइक्रोफोनको रूपमा काम गर्नेछ, साथै तपाईंको फोनबाट ध्वनि सिधै तपाईंको श्रवण यन्त्रहरूमा स्ट्रिम गर्नेछ। यस सुविधाको लागि उपयुक्त एप्पल उपकरणहरूको सूचीको लागि, कृपया यहाँ वेबसाइटमा जानुहोस्


www.danalogic.co.uk/connectivity

ब्लूटूथ कम ऊर्जा श्रवण यन्त्रहरूको फाइदाहरू

- श्रवण यन्त्रहरू लगाएर फोन कलहरू गाह्रो हुन सक्छन्। तपाईंको नयाँ श्रवण यन्त्रहरूले तपाईंलाई फोन र भिडियो कलहरू दुवै सिधै स्ट्रिम गर्न अनुमति दिनेछ। यसले के भनिएको छ भनेर सुन्न सजिलो बनाउँछ।
- अब तपाईंले आफ्नो स्मार्ट उपकरणबाट संगीत, भिडियो वा अन्य अडियो सुन्न हेडफोन लगाउनु पर्दैन किनभने ध्वनि तपाईंको श्रवण यन्त्रमा स्ट्रिम गरिनेछ।


ब्लूटूथ स्ट्रिमिङको लागि तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू जडान गर्दै


यदि तपाईंसँग उपयुक्त स्मार्ट उपकरण छ भने, कृपया आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू यसमा जडान गर्न यो पुस्तिकामा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।

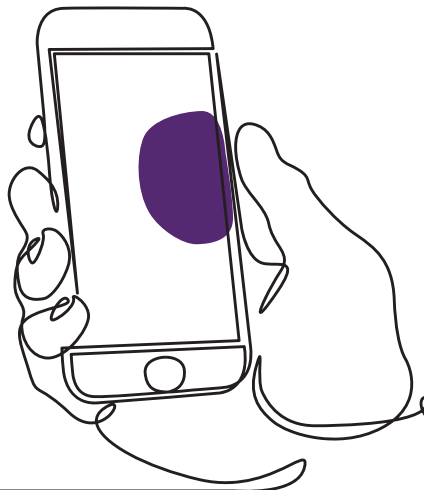

आफ्नो एप्पल उपकरणसँग आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू कसरी जोड्ने

1. आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू बन्द गर्नुहोस्।
2. आफ्नो एप्पल उपकरणको 'सेटिङ्हरू' मेनुमा गएर ब्ल्यूटूथ खोल्नुहोस्। ब्ल्यूटूथ सक्रिय गर्दा स्लाइडर हरियो हुन्छ।
3. मुख्य सेटिङहरू मेनुमा फर्कनुहोस् र त्यसपछि 'पहुँचयोग्यता' मा ट्याप गर्नुहोस्।
4. 'श्रवण यन्त्रहरू' मा तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
5. यदि तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू पहिले नै सक्रिय छन् भने, कृपया तिनीहरूलाई पुनः सुरु गर्नुहोस्। अन्यथा, कृपया आफ्नो श्रवण यन्त्रहरू खोल्नुहोस्। यसले तपाईंको एप्पल उपकरणले तपाईंको श्रवण यन्त्रहरू पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ।

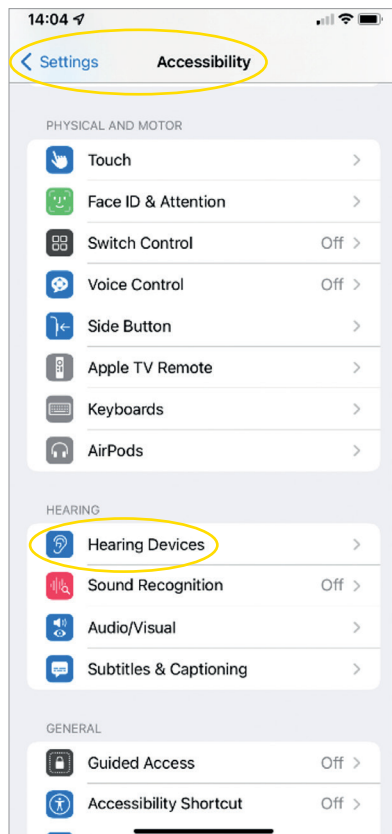

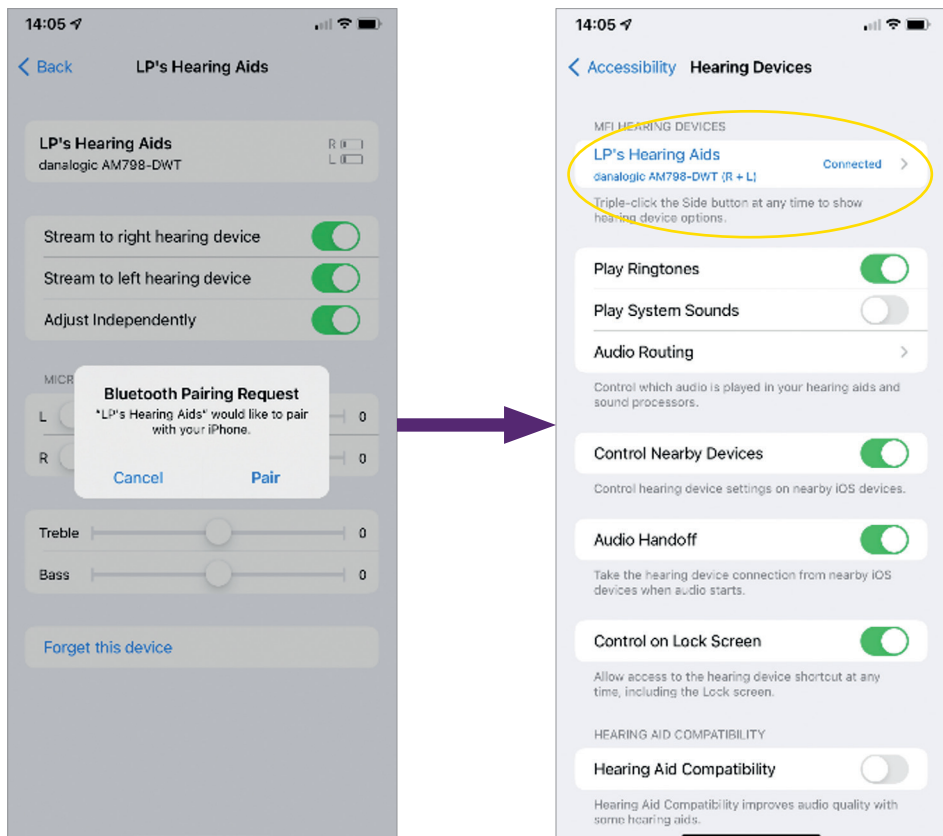


1. 'पेयर' मा ट्याप गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग दुई श्रवण यन्त्रहरू छन् भने, तपाईंले दुई पटक स्वीकार गर्नु पर्नेछ।
2. एप स्टोरमा जानुहोस् र आफ्नो श्रवण यन्त्रहरूको लागि 'बिमोर' खोज्नुहोस्।
3. बिमोरएप डाउनलोड गर्नुहोस्। यसलाई खोल्नुहोस् र 'सुरु गर्नुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्।
4. एपमा जाडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।

नोट: यी चरणहरू हुन् र iOS 13 र नयाँमा यो कस्तो देखिन्छ

यदि तपाईंलाई आफ्नो एप्पल उपकरण पुनः पेयर बनाउन आवश्यक छ

यदि तपाईंको एक वा दुवै श्रवण यन्त्रहरू प्रतिस्थापन गरिएको छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो स्मार्ट उपकरणमा पुनः पेयर बनाउन आवश्यक छ।

1. सेटिङ मेनुमा गएर पुरानो श्रवण यन्त्रहरू हटाएर सुरु गर्नुहोस्।
2. तल स्क्रोल गर्नुहोस् र 'पहुँच' चयन गर्नुहोस्।
3. 'श्रवण यन्त्रहरू' चयन गर्नुहोस्।
4. 'MFI श्रवण यन्त्रहरू' खण्ड अन्तर्गत स्क्रिनमा श्रवण यन्त्रहरू चयन गर्नुहोस् र 'यो यन्त्र बिर्सनुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्।
5. आफ्नो नयाँ श्रवण यन्त्रहरू पुनः सुरु गर्नुहोस् र 'पेयर' थिच्नुहोस्। यदि तपाईंले दुई श्रवण यन्त्रहरू लगाएको छ भने तपाईंले दुई पटक 'पेयर' ट्याप गर्नु पर्नेछ।

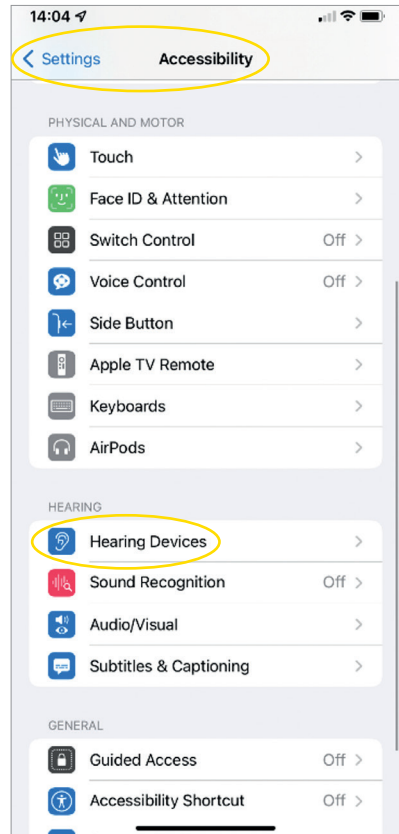


डेनालोजिक एक्स्टेन्डको साथ आईफोन® र आईप्याड® को लागि ह्यान्ड्स-फ्री कलहरूको आनन्द कसरी लिने

कृपया हाम्रो वेबसाइट www.danalogic.co.uk/connectivity जाँच गरेर तपाईंको उपकरण उपयुक्त छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।

प्रकार्य	कसरी
कलको जवाफ दिने	आईफोन/आईप्याडमा जवाफ दिन आफ्नो श्रवण सहायता बटनमा छोटो प्रेस वा स्लाइड प्रयोग गर्नुहोस्
कल अन्त्य गर्नुहोस्	कल अन्त्य गर्न आफ्नो श्रवण सहायता बटन केही सेकेन्डको लागि थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, आफ्नो स्क्रिनमा रातो बटन ट्याप गरेर
दोस्रो आगमन कलहरू	यदि तपाईं कलमा हुनुहुन्छ र तपाईंको दोस्रो कल आगमन भइरहेको छ भने, आफ्नो श्रवण सहायता बटनमा लामो प्रेस प्रयोग गरेर यसलाई अस्वीकार गर्नुहोस् वा आईफोन वा आईप्याड स्क्रिनमा 'अस्वीकार गर्नुहोस्' ट्याप गर्नुहोस्
भोल्युम परिवर्तन गर्नुहोस्	आईफोन वा आईप्याडमा भोल्युम माथि र तल बटनहरू प्रयोग गर्नुहोस्
आईओएस श्रवण सहायता सेटिङहरूमा ह्यान्ड्स-फ्री कलहरू बन्द गर्नुहोस्	सेटिंग्स पहुँच गर्न आईफोन पुश बटनमा तीन पटक क्लिक गर्नुहोस् (तपाईंले नियन्त्रण केन्द्र मार्फत पनि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ)। 'इनपुट विकल्पहरू' चयन गर्नुहोस् त्यसपछि 'अफ' गर्नुहोस्


श्रवण सहायता बटन

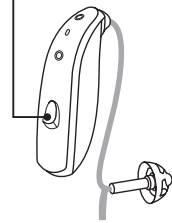

भिडियो कसरी गर्ने भन्ने पहुँच गर्न QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा भ्रमण गर्नुहोस्:
danalogic.co.uk/patient-portal

आफ्नो श्रवण यन्त्रहरूलाई तपाईंको Android™ उपकरणसँग कसरी जोड्ने

1. गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्, बिमोर खोज्नुहोस् र एप डाउनलोड गर्नुहोस्।
2. डाउनलोड गरि सके पछि, एप खोल्नुहोस् र 'सुरु गर्नुहोस्' मा ट्याप गर्नुहोस्।
3. एपमा जडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।

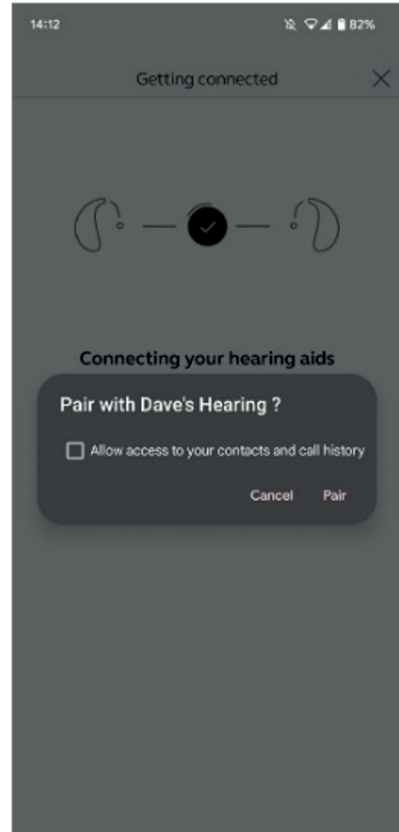

यदि तपाईंलाई आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरण पुनः पेयर बनाउन आवश्यक छ

यदि तपाईंको एक वा दुवै श्रवण यन्त्रहरू प्रतिस्थापन गरिएको छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो स्मार्ट उपकरणमा पुनः पेयर बनाउन आवश्यक हुनेछ।

1. 'सेटिङहरू' मेनु खोल्न स्क्रिनको माथिबाट तल स्वाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्ल्यूटूथ आइकनलाई 2 सेकेन्डको लागि होल्ड गर्नुहोस्।
2. श्रवणयन्त्रहरूको लागि सेटिङ आइकन 2 सेकेन्ड सम्म होल्ड गर्नुहोस्।
3. 'बिर्सनुहोस्' चयन गर्नुहोस्।
4. बिमोर एप खोल्नुहोस्।
5. 'बिमोर मेनु' खोल्नुहोस् र 'नयाँ श्रवणयन्त्रहरू पेयर बनाउनुहोस्' चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि जडान गर्न स्क्रिनमा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईं अब चलाउन तयार हुनुहुन्छ।



danalogic GN

यदि तपाईंलाई कठिनाई भइरहेको छ भने, थप मार्गदर्शनको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट **www.danalogic.co.uk/patient-portal** हेर्नुहोस् वा आफ्नो श्रव्यविद्लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।



श्रवणयन्त्र समर्थन, हेरचाह निर्देशनहरू, भिडियोहरू कसरी बनाउने र थप कुराहरूमा तत्काल पहुँचको लागि मलाई स्वयान गर्नुहोस्।

© 2024 GN श्रवण A/S. सबै अधिकारहरू सुरक्षित। डेनालोजिक GN श्रवण A/S को ट्रेडमार्क हो। एप्पल, एप्पल लोगो, आईफोन, आईप्याड र आइपड टच अमेरिका र अन्य देशहरूमा दर्ता भएका एप्पल इंकका ट्रेडमार्क हुन्। एप्पल स्टोर अमेरिका र अन्य देशहरूमा दर्ता भएका एप्पल इंकको सेवा चिन्ह हो। एन्ड्रोइड, गुगल प्ले र गुगल प्ले लोगो गुगल एलएलसीका ट्रेडमार्क हुन्। ब्लुटूथ शब्द चिन्ह र लोगोहरू ब्लुटूथ SIG, Inc. को स्वामित्वमा रहेका दर्ता गरिएका ट्रेडमार्कहरू हुन्। औराकास्ट शब्द चिन्ह र लोगोहरू ब्लुटूथ SIG, Inc. को स्वामित्वमा रहेका ट्रेडमार्कहरू हुन्।



danalogic GN

GN बाट डानालोजिक ले सम्पूर्ण बिरामी यात्रामा सकारात्मक नतिजाहरू ल्याउन कडा परिश्रम गर्दछ, NHS लाई वास्तवमै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राम्रो हेरचाह प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।

डानालोजिक GN समूहको एक हिस्सा हो - विश्व-अग्रणी श्रवण उपकरणहरूदेखि जाब्राकार्यालय हेडसेटहरू र खेलकुद हेडफोनहरूसम्म उत्कृष्ट ध्वनि अग्रणी। 1869 मा स्थापित र 5,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै। GN ले जीवनलाई राम्रो बनाउँछ।

www.danalogic.co.uk



GN श्रवन युके लिमिटेड.
युनिट 13,
तालिसम्यान बिजनेस सेन्टर,
बिसेस्टर OX26 6HR
टेलिफोन: +44 1869 352 800
फ्याक्स: +44 1869 343 466
danalogicuk@gnhearing.com
www.danalogic.co.uk